

M5 Ecografo portátil de Doppler Color Plataforma de Diagnóstico Por Ultrasonido

Las Cosas Buenas Vienen en Paquetes Pequeños

El lanzamiento de Mindray's ecografo portátil de Doppler Color M5 lleva a los usuarios mundiales a una nueva época en ecografos portátiles.

Desde su fundación, Mindray ha estado desarrollando nuestros propio patentes de tecnologías médicas. En ultrasonido, nuestras tecnologías enfocadas en el usuario, han creado una excelente familia de productos versátiles de ultrasonido.

El futuro del ultrasonido parece aún más emocionante con sistemas fáciles de transportar..

Mindray continua su desarrollo de tecnología en ultrasonido. Un innovador en soluciones de ecografia y el cuidado del paciente, ahora nos estamos esforzando para dejarles realizar exámenes de diagnóstico por imagen en más lugares. Esto contribuye una nueva época del cuidado médico en la cual la diagnosis con ultrasonido pueda suceder en cualquier momento y cualquier lugar.

El cuidado médico con ultrasonido está entrando en una nueva era y el usuario también.



M5 Ecografo portátil de Doppler Color Plataforma de Diagnóstico Por Ultrasonido

DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: SPAN-M5-210285X8-20100428

mindray







Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

Confía en el alto rendimiento

El M5 proporciona una amplia funcionalidad y gran confianza diagnóstica en una solución portátil. Mindray M5 se entrega la mejor calidad de imagen y las herramientas de optimización que se encuentra normalmente en equipos convencionales. El M5 se entrega una brillante capacidad de imagen en Doppler color, sin compromisos en el funcionamiento de 2D. Gracias a la formación de la imagen con múltiples formadores de haz (Multi-beam parallel imaging: MBP) el M5 se aumenta las imágenes por segundo para formar imágenes de alta calidad diagnóstica hasta 30 centímetros de profundidad. El diseño avanzado del M5 proporciona nuevos valores y niveles de productividad en entorno clínico diagnóstico.

El M5 ofrece todo los modos de imagen: 2D, M, PW, HPRF, CW, Color, Power y DirPower. El formato trapecoidal se amplía a el campo visual y las opciones como Smart3D™ y el iScape View™(imágenes panorámicas) permite acceder imágenes más avanzados de ecografía.

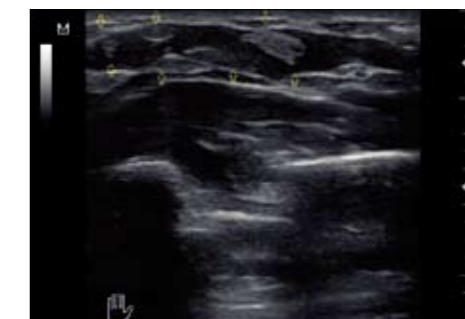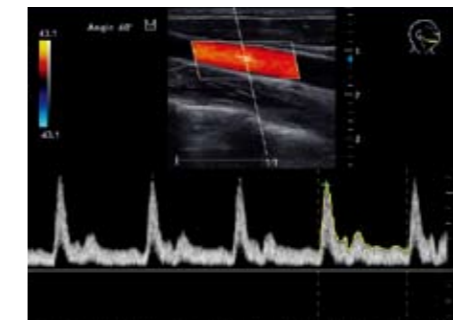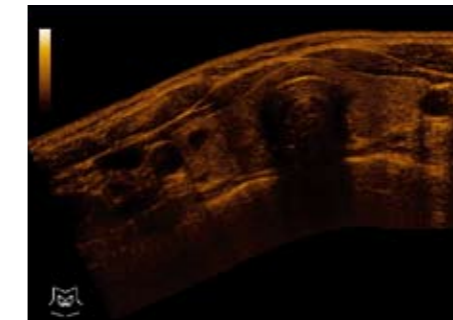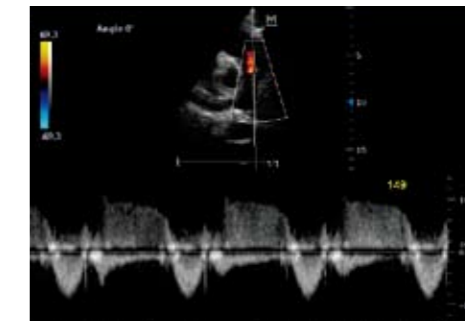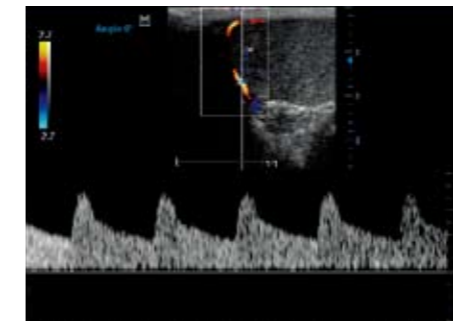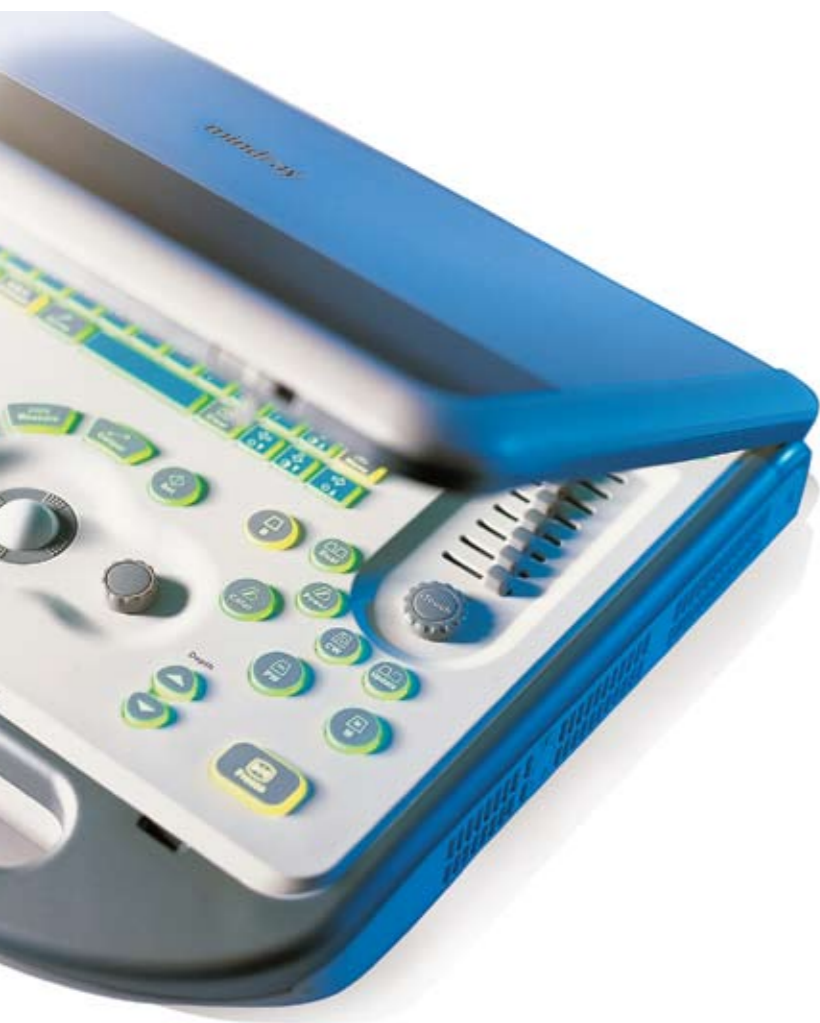

Sin Compromiso en calidad diagnóstica y a través de aplicaciones avanzadas, el M5 se entrega una respuesta diagnóstica desde lo más sencillo hasta lo más difícil.



El M5 entrega un diseño ergonómico muy rápida y fácil de utilizar en todo los niveles de usuarios. El M5 ofrece un monitor de 15 pulgadas TFT de alta resolución y de amplia vista independiente del ángulo. La cáscara de magnesio, anti-choque, se hace el M5 más durable.

M5 Ecografo portátil de Doppler Color Plataforma de Diagnóstico Por Ultrasonido

Entregando un examen más fácil

Basado en un interface multilingue y exámenes pre-configurados se permite el usuario modificar y personalizar su sistema para distintos tipos de preferencias, exámenes, cálculos o informes. En el entorno del paciente en estado crítico, la plataforma M5 proporciona un almacenamiento rápido y eficaz de las imágenes e informes, permitiendo el análisis pos-examen.

Prestaciones como iTouch™ la optimización automática de la imagen con apretar un solo botón, IP (procesamiento de imagen) que equilibra varios parámetros de la imagen al mismo tiempo, y acceso directo a las teclas más importantes en la optimización de la imagen resultan en máxima calidad diagnóstica con una mínima intervención y esfuerzo del operador.



Lleva M5 con usted a cualquier lugar en cualquier momento

Únicamente, por su tamaño pequeño, el M5 es fácil de transportar, extendiendo su uso a más lugares como quirófanos, y extra-hospitalarios: los gimnasios y ambulancias. Aprovechándose de un arranque rápido, baterías recargables, transductores ligeros, de multi-frecuencias con THI (tissue harmonic imaging para un mejor contraste y espacial resolución de imágenes), el M5 está preparado para exámenes en cualquier lugar a cualquier hora.

Una inteligente estación de trabajo integrado, iStation™, permite almacenar datos e imágenes del paciente. El usuario puede elegir recuperar estudios e informes para hacer un análisis pos-examen. La plataforma M5 está equipada con todas las tecnologías del laboratorio digital. Integración en red vía DICOM, y almacenamiento en USB, DVD-R/W, DVD recorder, etc

Accesorios prácticos del M5 para usted

